


# Instrukcja obsługi elektrycznej bańki chińskiej z funkcją podgrzewania

## 1. Opis urządzenia

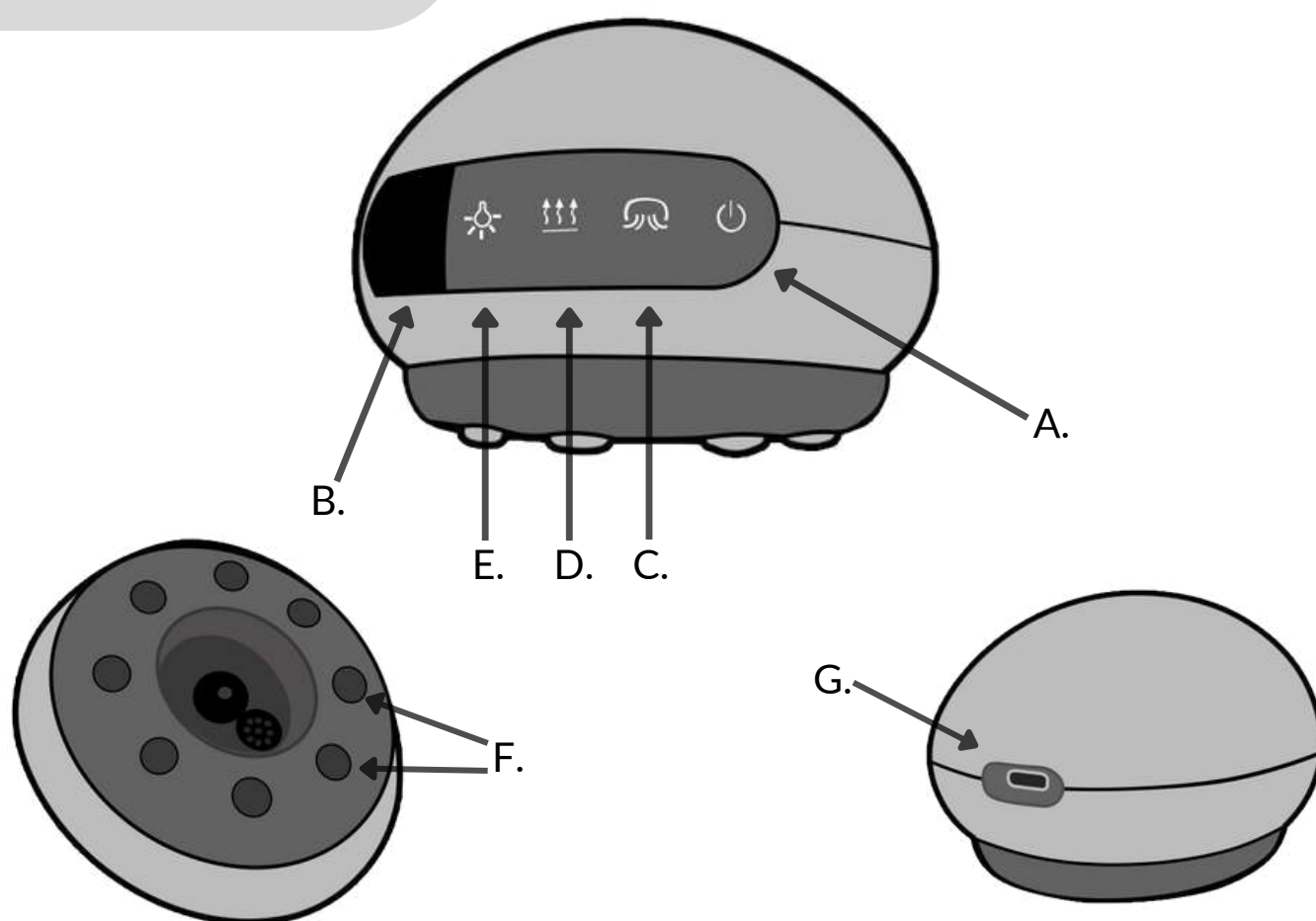

- A. włącznik / wyłącznik
- B. wyświetlacz LCD
- C. przycisk do regulacji poziomu ciśnienia
- D. przycisk do regulacji poziomu temperatury
- E. przycisk włączający / wyłączający światło czerwone
- F. kamienie magnetyczne (8 szt.)
- G. port ładowania USB

## 2. Cechy i zastosowanie

Elektryczna bańka chińska z funkcją podgrzewania posiada wygodny i ergonomiczny kształt, który zapewnia dopasowanie do dłoni i ułatwia wykonanie masażu. Bańka posiada 8 kamieni magnetycznych, regulację temperatury oraz poziomą "zasysania", a możliwość ładowania za pomocą kabla USB pozwala na korzystanie z bańki w dowolnym miejscu.

Elektryczna bańka chińska o właściwościach leczniczych i kosmetycznych znajdzie swoje zastosowanie m.in. podczas masażu antycellulitowego. Dzięki wykorzystaniu światła czerwonego, regulacji ciepła i intensywności można dostosować masaż do indywidualnych potrzeb.

## 3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

1. Osoby, u których występują żyłki nie powinny korzystać z masażu bańką chińską.
2. Nie zaleca się korzystania z bańki chińskiej w ciąży oraz w czasie menstruacji.
3. Osoby cierpiące na nadciśnienie lub hiperglikemię przed użyciem bańki powinny skontaktować się z lekarzem.
4. Nie powinno się korzystać z masażu elektryczną bańką po posiłku, a przerwa powinna wynosić ok. 30-40 minut.
5. Nie zaleca się kąpieli ani prysznicu tuż po masażu - należy odczekać ok. 3 godziny.
6. Masażu nie powinno się wykonywać codziennie, a ok. 3 lub 4 razy w tygodniu.
7. Przed każdym użyciem urządzenia należy upewnić się, że wewnątrz znajduje się bawełniany filtr zapobiegający przedostaniu się olejku do wnętrza urządzenia.
8. Przed każdym użyciem bańki należy nałożyć sporą ilość olejku do masażu, jednak w przypadku osób ze skórą wrażliwą, przed pierwszym użyciem należy zrobić test na alergię aplikując olejek np. na nadgarstku.
9. Masaż należy wykonywać w jednym kierunku i nie powinno się masować zbyt długo jednego miejsca na ciele.
10. Z bańki chińskiej nie należy korzystać podczas ładowania.
11. Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono odłączone od zasilania.
12. Przed każdym użyciem bańki należy umyć bawełniany filtr.
13. W przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki nie należy ich demontować samodzielnie, a zgłosić usterkę do serwisu.

14. Podczas czyszczenia urządzenia nie należy stosować akcesoriów nie przeznaczonych do elektrycznej bańki chińskiej.

15. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą - podczas czyszczenia nie należy wlewać wody do wnętrza ani na jego powierzchnię.

**16. Gdy występuje dyskomfort podczas korzystania z urządzenia należy zakończyć masaż.**

17. Urządzenia nie powinno się stosować w pomieszczeniach, gdzie występuje gorące lub wilgotne powietrze.

18. Z bańki chińskiej nie wolno korzystać podczas prowadzenia samochodu.

19. Elektryczna bańka chińska powinna być przechowywana w oryginalnym opakowaniu, w bezpiecznym, suchym miejscu niewidocznym dla dzieci, z dala od żrących środków i kurzu.

## 4. Zalecenia przed i po użyciu urządzenia

1. Elektrycznej bańki chińskiej nie powinno się używać na twarzy, szyi i klatce piersiowej.

2. Nie powinno się wykonywać masażu w jednym miejscu na ciele, a wykonywać masaż partiami.

3. Osoby, u których występują choroby i różnego rodzaju dolegliwości przed użyciem bańki powinny skonsultować się z lekarzem.

4. Po masażu ciała bańką chińską zaleca się wypicie ok. dwóch szklanek wody oraz odpoczynek przez ok. godzinę.

5. Ze względu na otwarcie porów podczas masażu należy unikać przeciągów i wiatru tuż po zabiegu.

6. Po masażu należy pójść pod prysznic (najlepiej ciepły), ale dopiero po upływie ok. 3 godzin.

7. Masażu nie należy wykonywać codziennie, a ok. 3 - 4 dni w tygodniu. Po sesji należy zrobić przerwę (5 - 7 dni) i ponownie wrócić do kolejnych sesji.

## 5. Jak korzystać z funkcji urządzenia?

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania do momentu, aż lampka zaświeci się na czerwono. W ten sam sposób należy wyłączać urządzenie - lampka zgaśnie.
2. Należy nacisnąć przycisk do regulacji poziomu ciśnienia (C) i naciskając kolejno wybrać poziom (1 - 5). Na wyświetlaczu pojawi się ikona ciśnienia oraz pojawi się sygnał dźwiękowy. W celu wyłączenia funkcji ciśnienia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (C).
3. W celu regulacji temperatury należy wybrać odpowiedni poziom (1 - 3) naciskając przycisk (D). W celu wyłączenia funkcji ogrzewania należy nacisnąć i dłużej przytrzymać przycisk (D).
4. W celu włączenia / wyłączenia światła czerwonego należy nacisnąć przycisk (E).
5. Podczas ładowania nie ma możliwości korzystania z urządzenia.

- Tryb domyślny: świecą się czerwone lampki.
- Tryb ciśnieniowy: poziom 1, 2, 3, 4, 5.
- Tryb ogrzewania: poziom 1, 2, 3.
- Niskie ogrzewanie:  $38^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}/100.4^{\circ}\text{F}\pm 5.4^{\circ}\text{F}$ .
- Średnie ogrzewanie:  $41^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}/105.8^{\circ}\text{F}\pm 5.4^{\circ}\text{F}$ .
- Wysokie nagrzewanie:  $44^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}/111.2^{\circ}\text{F}\pm 5.4^{\circ}\text{F}$ .

## 6. Jak wykonywać masaż ciała elektryczną bańką chińską?

Zawsze przed użyciem elektrycznej bańki chińskiej należy zaaplikować na skórę sporą ilość olejku do masażu, który zapewnia odpowiedni poślizg urządzenia po skórze. Masaż należy wykonywać zawsze w jednym kierunku - od dołu do góry.


- masaż grzbietu - od dołu do góry,
- podeszwa stopy - od pięty do palców,
- brzuch - ruchy okrężne lub od dołu do góry,
- ramiona - ruchy od dołu ku górze,
- masaż nóg - należy rozpocząć od masażu łydek kierując ruchy od dołu ku górze, następnie przechodząc do ud i pośladków.

## 7. Sposób ładowania urządzenia


1. Urządzenie zostało wyposażone w baterię litowo-jonową. Na wyświetlaczu pojawia się ikonka poziomu naładowania baterii, gdy wskazuje niski poziom, należy podłączyć urządzenie do ładowania.
2. W celu podłączenia urządzenia do ładowania należy podłączyć kabel USB do przejściówki, a następnie do gniazda zasilania, bądź bezpośrednio do portu USB komputera.
3. Na wyświetlaczu urządzenia będzie widoczny status ładowania. Podczas ładowania nie można jednocześnie korzystać z urządzenia.

## 8. Sposób czyszczenia i konserwacji urządzenia

1. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
2. Podczas czyszczenia najlepiej sprawdzi się miękka, wilgotna ściereczka, a w przypadku mocniejszych zabrudzeń warto wspomóc się niewielką ilością środka do dezynfekcji o stężeniu 75%.
3. W czasie czyszczenia oraz konserwacji należy pamiętać, aby nie zamoczyć urządzenia ani nie dopuścić do przedostania się płynów i środków czyszczących do wnętrza - mogłyby doprowadzić do zwarcia już podczas wykonywania masażu.
4. Podczas czyszczenia należy pamiętać także o wypłukaniu bawełnianego filtra lub wymianie na nowy (patrz rysunek poniżej).

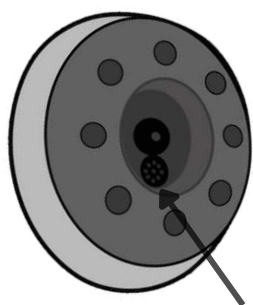


1. Należy otworzyć pokrywę filtra znajdującą się "pod spodem" bańki.

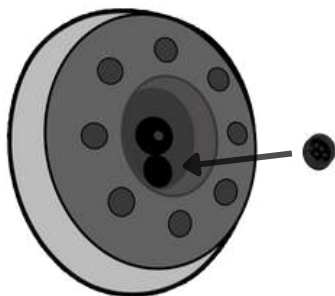

2. Następnie należy wyjąć filtr.



3. Włożyć bawełnę filtracyjną.

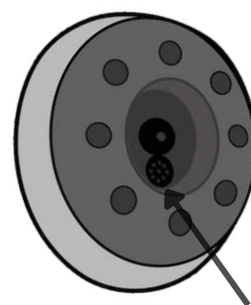

4. Ostrożnie zamocować filtr w bańce.

## 9. Sposób przechowywania

Elektryczną bańkę chińską należy przechowywać najlepiej w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od wysokiej temperatury, wilgoci i promieni słonecznych. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy je odłączyć od zasilania oraz ładować raz na około 2 miesiące.

## 10. Instrukcja utylizacji

Bateria litowo - jonowa do elektrycznej bańki chińskiej to specjalny akumulator i nie może być używany w innych urządzeniach. Należy przestrzegać zasad opisanych poniżej, w innym wypadku mogą doprowadzić do przegrzania, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.

1. Urządzenie należy trzymać z dala od ognia.
2. Nie wolno demontować części z urządzenia ani przekształcać go.
3. Nie wolno łączyć dodatniej i ujemnej elektrody z metalem.
4. Urządzenia nie powinno się przechowywać z biżuterią itp.
5. Nie powinno się używać ani ładować urządzenia w pobliżu ognia, kominka, pieca, kuchenki lub pod słońcem.

## 11. Dane techniczne

Nazwa produktu	Elektryczna bańka chińska
Model	AirBubble
Napięcie znamionowe	3.7V
Moc znamionowa	4.4w
Prąd czuwania po wyłączeniu	<20uA
Hałas	<65dB
Niskie ogrzewanie	38°C±3°C/100.4°F±5.4°F
Średnie ogrzewanie	41°C±3°C/105.8°F±5.4°F
Wysokie ogrzewanie	44°C±3°C/111.2°F±5.4°F
Inteligentny czasomierz	10 min
Pojemność akumulatora	2200mAh

## 12. Rozwiązywanie problemów

Problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Produkt nie włącza się.	Bateria jest rozładowana.	Naładuj produkt.
	Produkt jest ładowany.	Produkt należy stosować po pełnym naładowaniu.
Bateria nie ładuje się.	Wtyczka nie została wpięta prawidłowo.	Ponownie podłącz wtyczkę.

ACUS MED. Sp. z o.o.  
Kolbuszowa Dolna ul. Mielecka 105  
36-100 Kolbuszowa  
POLSKA

+48 570 266 112  
info@acusmed.pl

